



Carpentier-Edwards PERIMOUNT
Magna Mitral Ease
Bioprótesis pericárdica

Con la válvula Magna Mitral Ease, puede elegir con confianza, sabiendo que está obteniendo una válvula de Edwards Lifesciences, el líder mundial en terapia de válvulas cardíacas. Construida sobre el diseño único y probado de la válvula PERIMOUNT, la válvula Magna Mitral Ease le brinda a usted y a sus pacientes:

- Perfil **ultra bajo**, con una proyección ventricular reducida hasta en un 40 %*
- Excepcional **durabilidad a largo plazo**
- **Facilidad de implante**

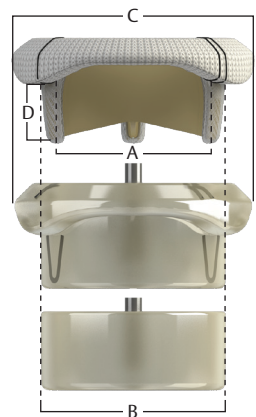

Especificaciones nominales del modelo 7300TFX (mm)					
Tamaño	25 mm	27 mm	29 mm	31 mm	33 mm
A. Diámetro del stent (forma de alambre)	25	27	29	31	31
B. Diámetro del anillo de tejido	28	29.5	31.5	33.5	33.5
C. Diámetro del anillo de sutura exterior	36	38	40	42	44
D. Perfil efectivo anterior	7	7.5	8	8.5	8.5

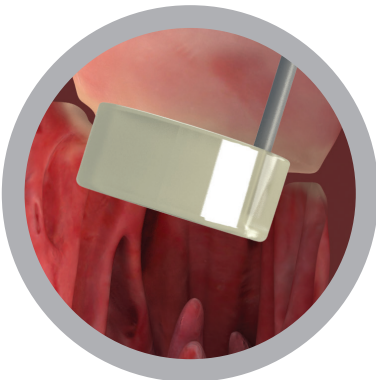

El barril preinstalado y los calibreadores de réplica facilitan el dimensionamiento de la válvula



Accesorios

Set de accesorios tamaño barril	SET1173B
Conjunto de accesorios para calibreadores de réplica	SET1173R
Mango flexible y reutilizable	1173



Mango flexible con válvula adjunta

Referencias

1. Aupart, MR, et al. Carpentier-Edwards pericardial valves in the mitral position: ten-year follow-up. J Thorac Cardiovasc Surg.1997 Mar;113(3):492-8. (Freedom from structural deterioration; n = 150; mean age = 62.9 ± 11.9 yrs)
2. Jamieson, WRE, et al. Structural Valve Deterioration in Mitral Replacement Surgery: Comparison of Carpentier-Edwards Supra-Annular Porcine and PERIMOUNT Pericardial Bioprostheses. J Thorac Cardiovasc Surg. 1999 Aug;118:297-305. (Freedom from explant due to structural valve deterioration; n = 429; mean age = 60.7 ± 11.7 yrs)
3. Murakami, T, et al. Aortic and mitral valve replacement with the Carpentier-Edwards pericardial bioprosthesis: 10-year results. J Heart Valve Dis. 1996 Jan;5(1):45-9. (Freedom from structural deterioration; n = 57, mean age = 55.1 ± 13.2 yrs)
4. Poirier, NC, et al. 15-year experience with the Carpentier-Edwards pericardial bioprosthesis. Ann Thorac Surg. 1998;66:S57-61. (Freedom from structural deterioration; n = 214; mean age = 65 ± 23 yrs)
5. Neville, PH, et al. Carpentier-Edwards pericardial bioprosthesis in aortic or mitral position: a 12-year experience. Ann Thorac Surg. 1998;66(6 Suppl):S143-7. (Freedom from structural deterioration; n = 182; mean age = 63.9 ± 11.5 years)
6. Marchand, MA, et al. Fifteen-year experience with the mitral Carpentier-Edwards PERIMOUNT pericardial bioprosthesis. Ann Thorac Surg. 2001 May;71(5 Suppl):S236-9. (Freedom from structural valve deterioration; n = 435; mean age = 60.7 ± 11.6 yrs)
7. Carpentier-Edwards PERIMOUNT pericardial bioprosthesis 16-year results. Data on file at Edwards Lifesciences, 2003. (Freedom from explant due to structural valve deterioration; n = 404 mean age = 60.7 ± 11.6 yrs)
8. Bourguignon, T, et al. Very late outcomes for mitral valve replacement with the Carpentier-Edwards pericardial bioprosthesis: 25 year follow-up of 450 implantations. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Nov;148:2004-11. (Freedom from explant due to structural valve deterioration; n = 404; mean age = 68.0 ± 10.4 yrs)

Breve resumen: Bioprótesis aórticas

Indicaciones: Para uso en pacientes cuya enfermedad valvular aórtica justifique el reemplazo de su válvula protésica natural o colocada previamente. **Contraindicaciones:** No utilice si el cirujano cree que sería contrario a los mejores intereses del paciente. **Complicaciones y efectos secundarios:** Estenosis, regurgitación, endocarditis, hemólisis, tromboembolismo, trombosis valvular, disfunción no estructural, deterioro estructural de la válvula, anemia, arritmia, hemorragia, ataque/ictus isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, angina, cualquiera de los cuales podría llevar a reoperación, explantación, incapacidad permanente y muerte. **Advertencias:** Se deben considerar terapias alternativas en presencia de afecciones que afectan el metabolismo del calcio o cuando se usan terapias con medicamentos crónicos que contienen calcio, incluidos niños, adolescentes, adultos jóvenes y pacientes con una dieta con alto contenido de calcio o hemodiálisis de mantenimiento. Debe utilizarse con precaución en presencia de hipertensión sistémica grave o cuando la longevidad anticipada del paciente sea mayor que la longevidad conocida de la prótesis.

PRECAUCIÓN: La ley federal (Estados Unidos) restringe la venta de este dispositivo a una prescripción médica o de acuerdo con esta. Consulte las Instrucciones de uso para obtener información completa sobre la prescripción, incluidas indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y eventos adversos.

Edwards, Edwards Lifesciences, el logotipo estilizado E, Carpentier-Edwards, Magna, Magna Ease, PERIMOUNT, PERIMOUNT Magna y TheraFix son marcas comerciales de Edwards Lifesciences Corporation. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.


© 2018 Edwards Lifesciences Corporation. Todos los derechos reservados. PP--US-2937 v1.0

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine CA 92614 EE. UU. • edwards.com



Edwards

Elija lo que elegiría para usted mismo

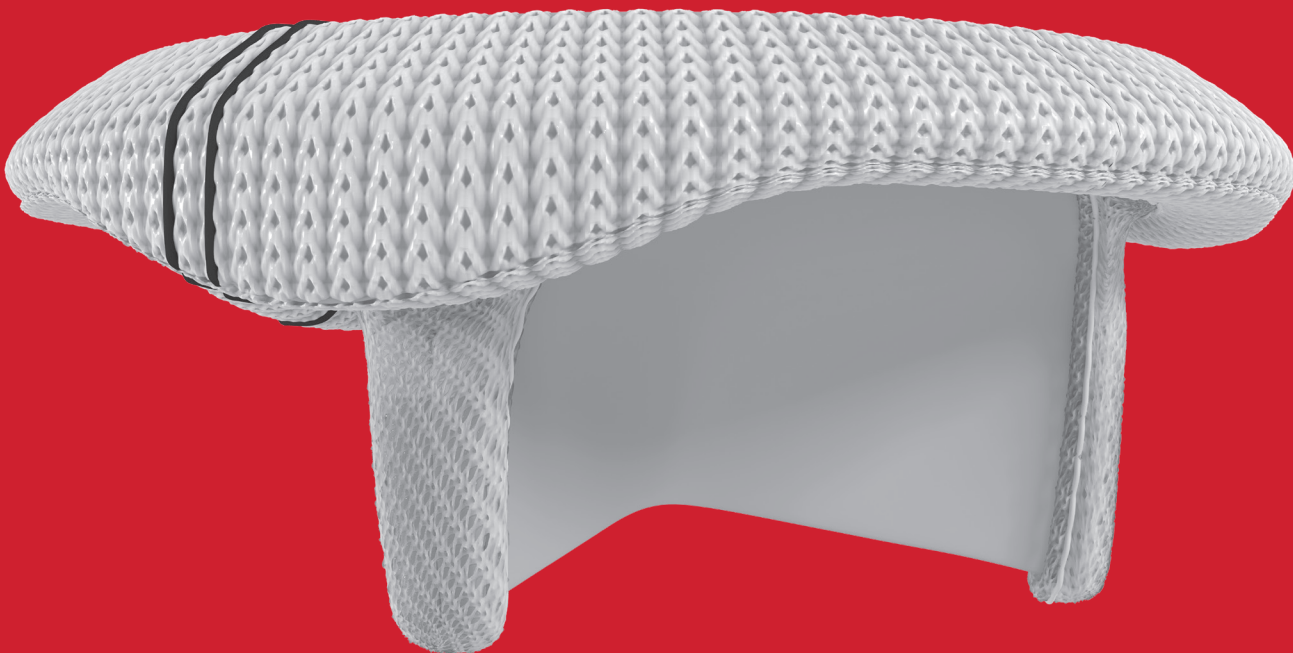

Carpentier-Edwards PERIMOUNT
Magna Mitral Ease
Bioprótesis pericárdica




Edwards

* Comparado con la válvula mitral PERIMOUNT Theon de Carpentier-Edwards


Todo comienza con el

Diseño probado de PERIMOUNT

La válvula Magna Mitral Ease se basa en el diseño probado y verificado de la válvula PERIMOUNT, con elementos de diseño únicos que incluyen:

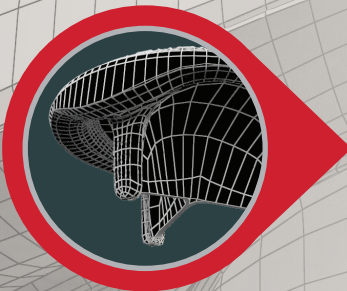

Modelado matemáticamente, diseño de bioingeniería.
Diseñado para optimizar la **implantabilidad**, la **hemodinámica** y la **durabilidad a largo plazo**

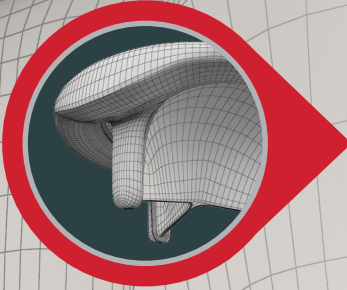


Stent flexible de aleación de cromo-cobalto
Absorbe la energía para reducir el estrés de las valvas



Tres valvas pericárdicas bovinas independientes
Compatible con el espesor y la elasticidad para optimizar la distribución del estrés

Perfil ultra bajo, con una proyección ventricular reducida hasta en un 40 %*


- La posición supraanular y el diseño asimétrico ayudan a reducir la proyección ventricular†

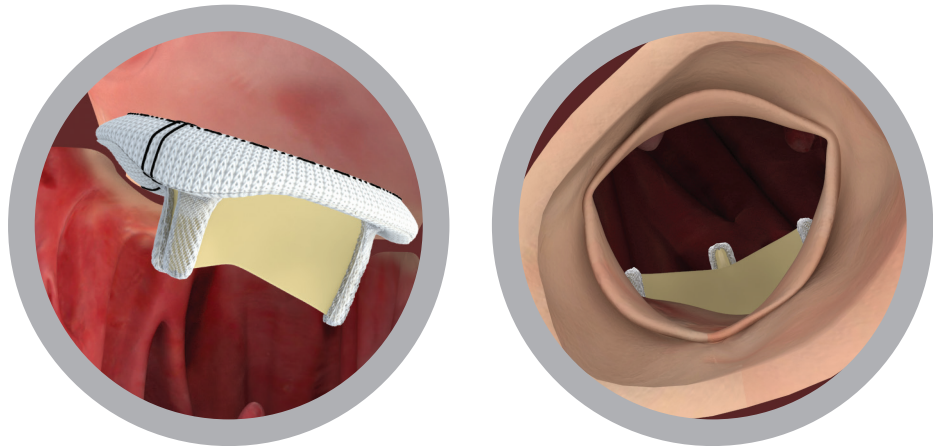

** En comparación con la válvula mitral Theon PERIMOUNT de Carpentier-Edwards

Facilidad de implante


- Mango ancho y contorneado con sillín anterior único y contorno lateral para imitar la forma de la anatomía mitral nativa

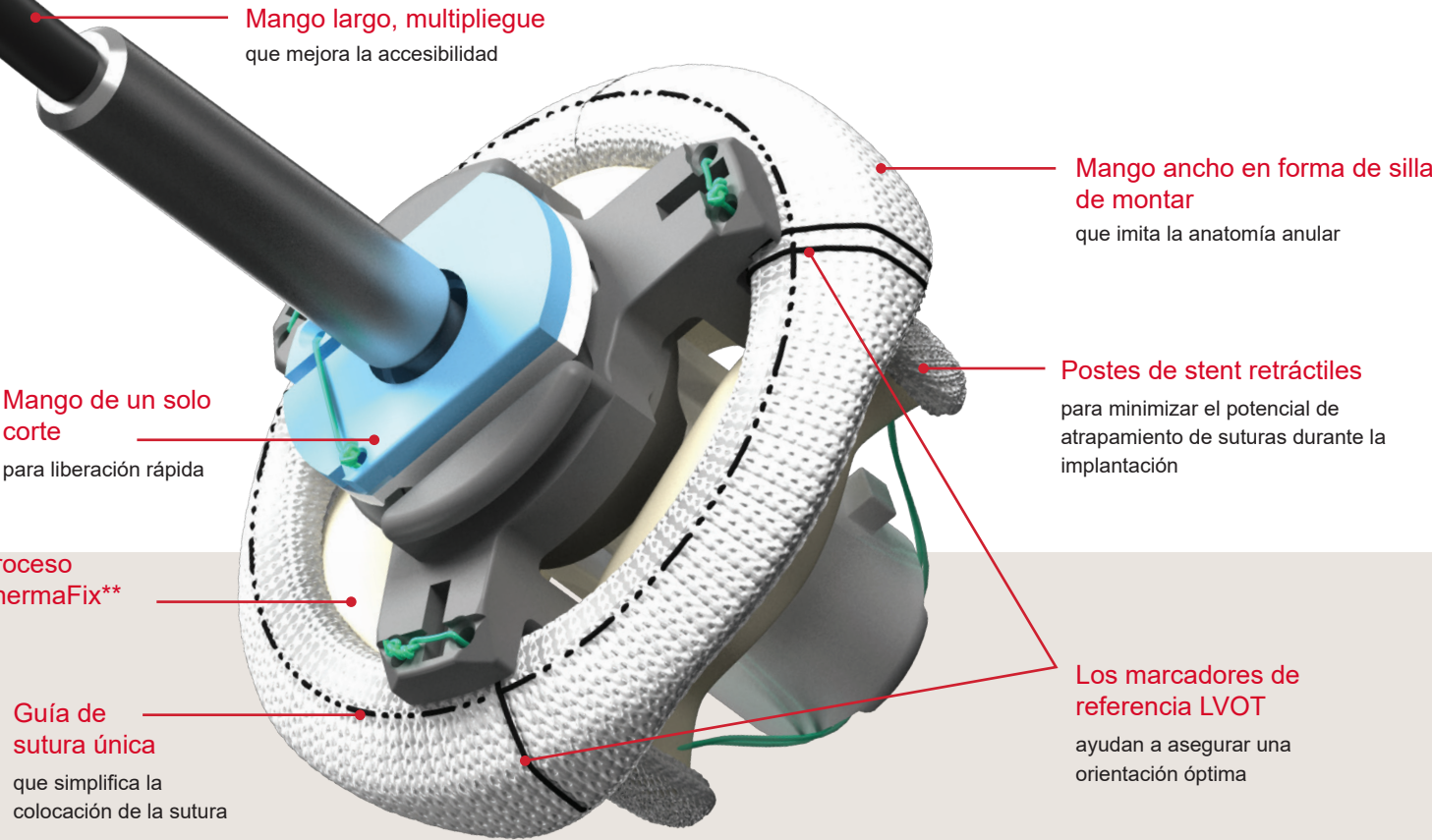

** No hay datos clínicos disponibles que evalúen el impacto a largo plazo del tratamiento con ThermoFix de Carpentier-Edwards en pacientes.

Durabilidad excepcional a largo plazo

- Basado en el rendimiento comprobado del diseño de la válvula PERIMOUNT, con una durabilidad clínica publicada de hasta 20 años

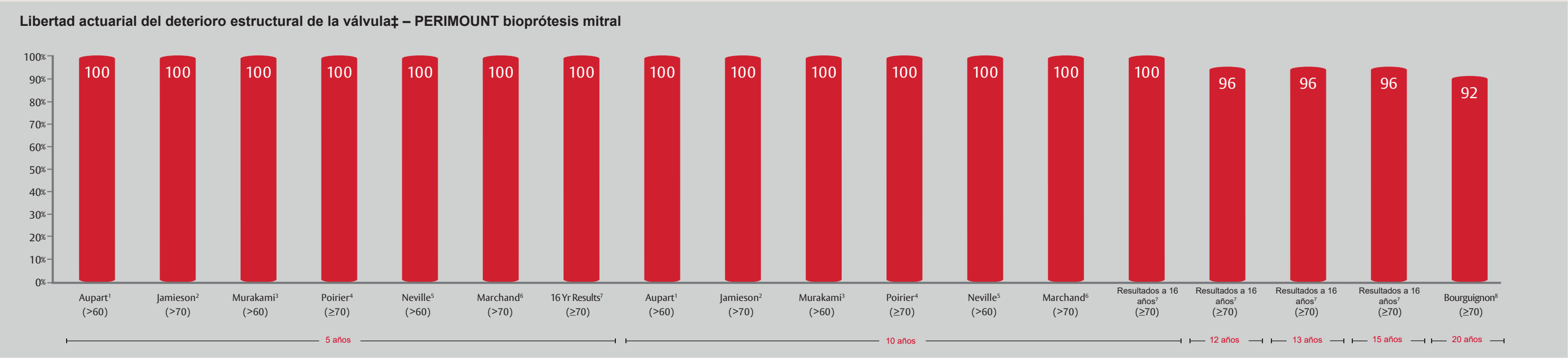

‡ Los pacientes y los resultados son un subconjunto de cada estudio. Los métodos de información varían según las fuentes de literatura. Ver referencias para definiciones.